

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology





PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

La Cultura Zirkonzahn

PUENTES DE ZIRCONIA PRETTAU® 2 DISPERSIVE® CON BARRAS DE TITANIO ANODIZADAS

- Situación inicial:** *Paciente masculino de mediana edad. Maxilar superior e inferior desdentados, con cuatro implantes en cada uno, restaurado con dos prótesis totales removibles provisionales*
- Solicitud del paciente:** *Restauración fija, durable, altamente estética para sonreír ampliamente*
- Datos del paciente:** *Fotos, modelos con implantes, escaneo de las prótesis totales*
- Rehabilitación planeada:** *Arcadas completas de zirconia Prettau® 2 Dispersive® con una correcta oclusión*
- Fases de elaboración:**
- Digitalización y articulación de los modelos
 - Elaboración de prototipos de resina, con la nueva oclusión en el software Zirkonzahn.Modellier, basada en escaneos y la biblioteca de dientes individuales
 - Fresado de los prototipos de resina y estratificación de las zonas gingivales. Prueba
 - Después de la prueba en boca: Escaneo de los prototipos para elaborar las barras de titanio
 - Modelación, fresado y escaneo de barras para las estructuras finales
 - Adaptación digital del wax-up del prototipo superior e inferior a las barras de titanio
 - Fresado de estructuras digitales en un bloque de zirconia Prettau® 2 Dispersive®
 - Reducción del encía; acentuación del color y sinterización de las estructuras
 - Finalización estética de los puentes: estratificación con cerámica de las zonas gingivales y caracterización con los ICE Stains 3D;
 - Control sobre el modelo, anodización de las barras y cementación en los puentes Prettau®
- Resultado:** *Óptimo! Restauración funcional y muy estética que permitió al paciente sonreír ampliamente*

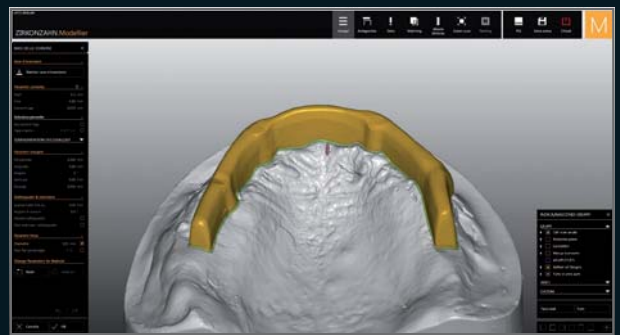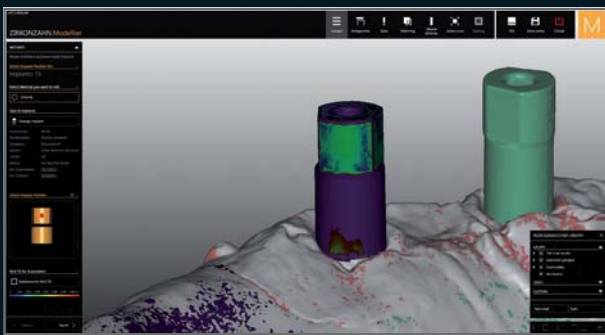

100 % DISEÑO MONOLÍTICO, ESTRATIFICADO SÓLO EN LA ZONA GINGIVAL

*TPD. Federico Presicci, Laboratorio Dental de Antonio Lazetera, Savona, Italia
Dr. Nicola De Angelis y Dr. Marco De Lorenzi, Acqui Terme, Italia*





¡NUEVO! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- Zirconia policromática altamente translúcida, con colores naturales esfumados y una elevada resistencia a la flexión
- ¡Sin límites! Especialmente indicada para arcadas completas monolíticas así como coronas individuales, inlays, onlays, veneers, barras y puentes de varias unidades (completamente anatómicas o reducidas)
- Gracias a la elaboración completamente monolítica sin cerámica, no se producen fracturas (chipping); no provoca abrasión del antagonista
- Permite la caracterización individual de la restauración con Colour Liquid Prettau® 2 Aquarell intensivos, ICE Ceramics, Fresco Ceramics y ICE Stains 3D by Enrico Steger



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Si desea conocer a nuestros afiliados comerciales en su propio país, consulte nuestra página web

NOVEDAD! 1 ÓRBITA 4 DIÁMETROS 125, 106, 98 Y 95 mm

LÍNEA DE FRESADORAS CONFORT M2 CON TELESKOPOR ORBIT EXTRA GRANDE.
TOTALMENTE AUTOMÁTICA, FLEXIBLE, LIBRE DE VIBRACIONES



LÍNEA DE
FRESADORAS
CONFORT M2



WEAB2676ES=

Estas páginas están destinadas a un público internacional. No todos los productos mencionados están disponibles en todos los países. El área de aplicación de los productos puede variar según el país. Contacte su equipo de ventas para obtener información más detallada. Toda la información está sujeta a cambios. Salvo error u omisión. Versión: 12/01/2022