

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



ZIRCON PRETTAU® 2 – MADE BY CAD/CAM

« La perfection par la persévérance » Enrico Steger


BRIDGE PRETTAU® EN ZIRCON PRETTAU® 2 AVEC BASES EN TITANE ANODISÉES

Aspect naturel, stabilité, confort et biocompatibilité optimale : si élaborée professionnellement, la zircone satisfait toutes les exigences d'une prothèse dentaire de haute qualité et de longue durabilité. Cependant, toutes les zircons ne se valent pas. Les différents types de zircone se distinguent en termes de translucidité et de résistance. Selon la restauration requise, il faut sélectionner le matériau avec la meilleure combinaison de propriétés. Par exemple, pour réaliser une arcade complète esthétique en tenant également compte des paramètres de fonctionnalité, c'est le degré de résistance à la flexion qui fait la différence. Pour le traitement de ce cas, on a choisi la nouvelle zircone Prettau® 2, où l'excellente résistance à la flexion s'unit à une translucidité très élevée. Avant de créer le Bridge Prettau® en zircone Prettau® 2, on a fabriqué un provisoire en résine Multistratum® Flexible sur la base des modèles et des données numériques en 3D du patient. Le patient a porté le provisoire pendant plusieurs mois. Après cette période, le provisoire a été numérisé au moyen du scanner S900 ARTI, afin de créer un Bridge Prettau® final avec les mêmes caractéristiques que le provisoire. La structure en zircone a été modélisée sur la base du design de cut-back de la bibliothèque de dents virtuelle « Heroes Collection » et fraisée avec la fraiseuse M1 Wet Heavy Metal. Ensuite, la restauration a été colorée manuellement avec les nouveaux Colour Liquids, stratifiée avec ICE Zirkon Céramique et caractérisée avec les teintes maquillantes. Pour une meilleure stabilisation de la structure en Prettau® 2, des bases en titane précédemment anodisées ont été collées dans le Bridge Prettau® avant de le placer dans la bouche du patient.



100% FONCTION ET ESTHÉTIQUE

Prot. Dent. Federico Presicci – Zirkonzahn Education Center Brunico, Italie

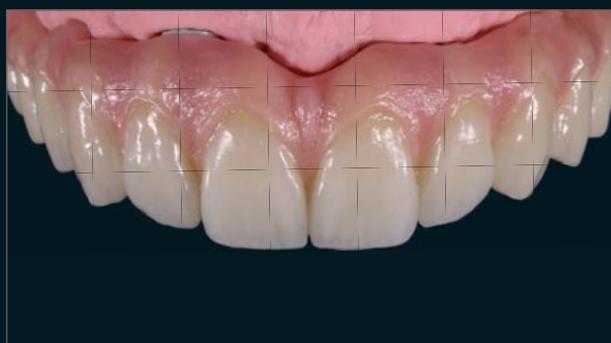

NOUVEAU ! PRETTAU® 2

- Zirconne très translucide avec une extraordinaire résistance à la flexion
- Sans limites ! Particulièrement adaptée pour les arcades complètes (entièrement anatomiques ou réduites pour la stratification avec céramique), mais aussi pour les couronnes unitaires, les inlays, les onlays, les facettes, les barres et les bridges à plusieurs éléments
- Pas d'écaillage de la céramique (grâce à la conception entièrement anatomique) et pas d'abrasion de l'antagoniste
- Caractérisation individuelle de la restauration avec Colour Liquids Prettau® 2 Aquarell, ICE Zirkon Céramique et les Teintes maquillantes ICE Zirkon 3D by Enrico Steger
- Dans l'avenir, disponible aussi en version pré-colorée : monochrome (Prettau® 2 Coloured) ou avec nuances de couleurs naturelles (Prettau® 2 Dispersive®)



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Rotec – Tél +33 240 62 11 02 – Fax +33 240 24 72 15 – contact@rotec.fr – www.rotec-fr.com

Zirkonzahn Worldwide – Tél +39 0474 066 680 – Tél +33 388 23 30 97 – info@zirkonzahn.com

PRETTAU®


T1



COLOUR
LIQUID

PRETTAU® 2


T2

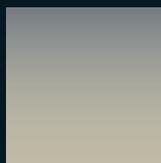

DISPERSIVE®

PRETTAU® 3


T3

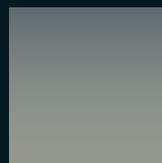

DISPERSIVE®

PRETTAU® 4
ANTERIOR®

T4

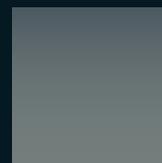

DISPERSIVE®



WEAA5769=