


## Istruzioni d'uso


### Colorazione della zirconia con i Colour Liquid Prettau® Aquarell

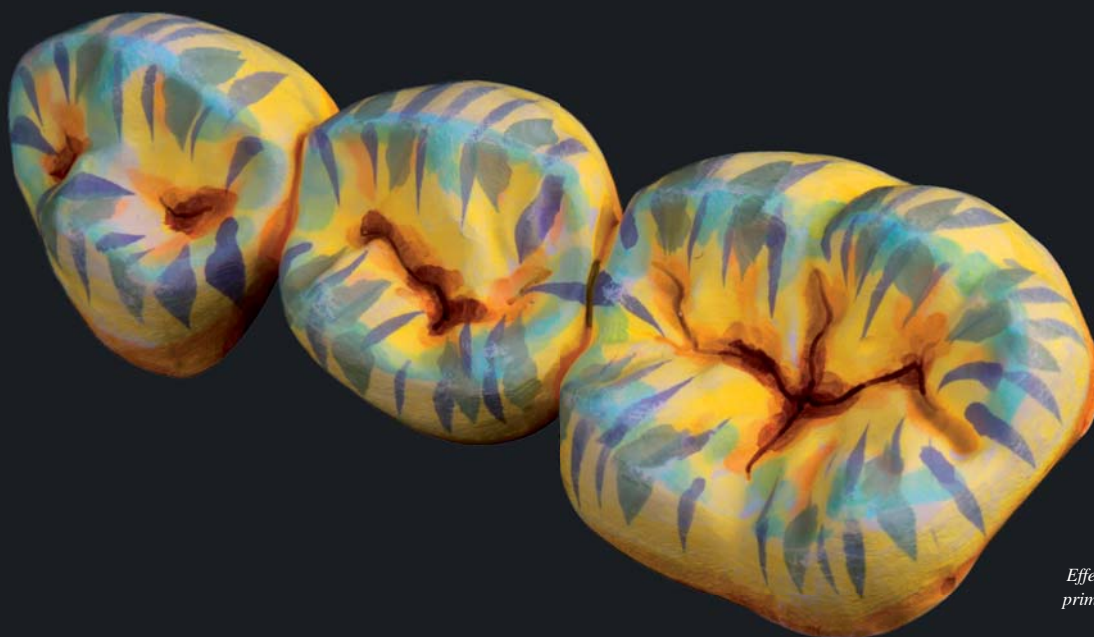

*Effetto del lavoro colorato prima della sinterizzazione*

I 16 colori della serie Colour Liquid Prettau® Aquarell coprono l'intero spettro cromatico della "scala vita", sono a base di acqua e privi di acidi. Questi nuovi colori sono inoltre dotati di speciali pigmenti bio calcinabili che permettono un facile orientamento nella scelta della tonalità più adatta, e rendono visibile ogni singola pennellata che può essere controllata prima del processo di sinterizzazione. La colorazione personalizzata dei particolari, p.es. dei mamelloni, delle aree cervicali e interdentali, può così essere notevolmente accentuata ed eseguita con estrema precisione.

Durante la sinterizzazione i pigmenti bio calcinabili al 100% bruciano completamente e ne consegue un restauro perfettamente rifinito e nel colore dentale desiderato. L'applicazione delle tonalità specifiche per le aree cervicali ed i colori intensi conferiscono, infine, al lavoro un maggiore pregio estetico. Per i nuovi colori acquerello della serie Prettau® è stata messa a punto anche una tecnica di pennellatura facilmente eseguibile per colorare la zirconia Prettau® grezza senza l'impiego di acidi.

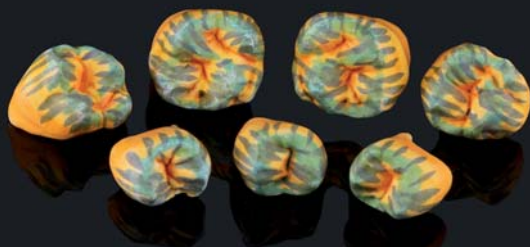

*Effetto della colorazione finita prima della sinterizzazione*



*Risultato del lavoro dopo la sinterizzazione*

#### Materiali necessari



Colour Liquid Prettau® Aquarell



Lampada infrarossa



Pennello senza parti in metallo per l'applicazione dei liquidi coloranti



Forno per sinterizzazione



Salvietta di carta per asciugare il pennello

#### Indicazioni per la conservazione e l'applicazione

Conservare i Colour Liquid Prettau® Aquarell in un luogo fresco e buio. Per ottenere un colore omogeneo, agitare bene i flaconi prima dell'uso. Immergere completamente il pennello nel colore ed eliminare il prodotto in eccesso passando il pennello sul bordo del flacone, prima di colorare i pezzi grezzi. In caso di cambio del pennello, lavarlo bene in abbondante acqua.



## Istruzioni per la colorazione di un dente del settore anteriore

Situazione di partenza: dente fresato



Fase	Colour Liquid	Applicazione	area labiale	area palatale
1	<b>A3 Prettau®</b> <b>Aquarell</b> Colour Liquid	1x 2x 3x		
2	<b>A3 Prettau®</b> <b>Aquarell</b> Colour Liquid	1x 2x		
3	<b>A3 Prettau®</b> <b>Aquarell</b> Colour Liquid	1x		
4	<b>Cervical A</b> <b>Aquarell</b> Colour Liquid for Prettau®	1x		
5	<b>Incisal blue</b> <b>Aquarell</b> Colour Liquid for Prettau®	1x - 2x		
6	<b>Incisal grey</b> <b>Aquarell</b> Colour Liquid for Prettau®	1x		
7	<b>Incisal violet</b> <b>Aquarell</b> Colour Liquid for Prettau®	1x		
8	<b>Orange 1</b> <b>Aquarell</b> Colour Liquid for Prettau®	1x		
	<b>Brown 2</b> <b>Aquarell</b> Colour Liquid for Prettau®	1x		

**Asciugatura:** dopo avere colorato il manufatto, posizionarlo sul supporto in refrattario e metterlo sotto la lampada infrarossa, con la superficie occlusale rivolta verso il basso e lasciare asciugare per 20 – 40 minuti a seconda delle dimensioni del pezzo. **NB:** l'eventuale superamento di questi tempi non altera comunque i colori.

## Istruzioni per la colorazione di un dente del settore posteriore

Situazione di partenza: dente fresato



Fase	Colour Liquid	Applicazione	area buccale	area occlusale
1	<b>A3 Prettau® Aquarell</b> Colour Liquid			
2	<b>A3 Prettau® Aquarell</b> Colour Liquid			
3	<b>A3 Prettau® Aquarell</b> Colour Liquid			
4	<b>Cervical A Aquarell</b> Colour Liquid for Prettau®			
5	<b>Incisal blue Aquarell</b> Colour Liquid for Prettau®			
6	<b>Incisal grey Aquarell</b> Colour Liquid for Prettau®			
7	<b>Incisal violet Aquarell</b> Colour Liquid for Prettau®			
8	<b>Orange 1 Aquarell</b> Colour Liquid for Prettau®			

**Asciugatura:** dopo avere colorato il manufatto, posizionarlo sul supporto in refrattario e metterlo sotto la lampada infrarossa, con la superficie occlusale rivolta verso il basso e lasciare asciugare per 20 – 40 minuti a seconda delle dimensioni del pezzo. **NB:** l'eventuale superamento di questi tempi non altera comunque i colori.

## Serie completa dei colori Colour Liquid Prettau® Aquarell



Colour Liquid Prettau® Aquarell A1-D4

A base di acqua con pigmenti bio, per la colorazione a pennello della Zirconia Prettau® grezza

Disponibili in flaconi da 20 ml o 50 ml in set o singolarmente



Colour Liquid Prettau® Aquarell Cervical A-D

A base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi, per la colorazione dell'area interdentale, dell'area cervicale e dei solchi occlusali

Disponibili in flaconi da 20 ml; ideali per Zirconia Prettau®



Colour Liquid Prettau® Aquarell Intensiv

ideali per Zirconia Prettau®

Disponibili in flaconi da 20 ml, in set o singolarmente

- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Tissue A:** a base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi; per la colorazione dell'area gengivale (rosa chiaro)
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Tissue B:** a base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi; per la colorazione dell'area gengivale (rosa)
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Tissue C:** a base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi; per la colorazione dell'area gengivale (rosa-violetto)
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal blue:** a base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi; per la colorazione dell'area incisale e per dare un effetto di profondità (bocca di pesce)
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal grey:** a base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi; per la colorazione delle zone trasparenti, al fine di abbassare i livelli di grigio
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal violet:** a base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi; per la colorazione delle aree incisali
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Orange 1:** a base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi; per la colorazione dei solchi occlusali
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Brown 2:** a base di acqua con pigmenti bio e privi di acidi; per la colorazione dei solchi occlusali

DISPONIBILI  
A BREVE!



Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment

Disponibili in flaconi da 10 ml, in set o singolarmente

- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment A1-D4:** pigmenti colorati per vivacizzare i Colour Liquid Prettau® Aquarell A1-D4
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Tissue:** pigmenti colorati per vivacizzare i Colour Prettau® Aquarell Tissue A-C
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Orange:** pigmenti colorati per vivacizzare i Colour Liquid Prettau® Aquarell Orange 1 e i Colour Liquid Prettau® Aquarell Cervical A-D
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Brown:** pigmenti colorati per vivacizzare i Colour Liquid Prettau® Aquarell Brown 2
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Grey:** pigmenti colorati per vivacizzare i Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal grey
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Violet:** pigmenti colorati per vivacizzare i Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal violet
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Blue:** pigmenti colorati per vivacizzare i Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal violet



Colour Liquid Waterbased Diluente

A base di acqua, per diluire e schiarire tutti i Colour Liquid Waterbased, i Colour Liquid Prettau® Aquarell, i colori per l'area cervicale e i colori intensi della serie Prettau® Aquarell

Flacone da 100 ml



Colour Liquid Waterbased Stabilizzatore

Stabilizzatore a base di acqua, per rendere omogenei tutti i Colour Liquid Waterbased, i Colour Liquid Prettau® Aquarell, i colori per l'area cervicale, i colori intensi della serie Prettau® Aquarell e per correggere eventuali risultati cromatici (aggiungere un 5% di prodotto)

Flacone da 100 ml