

**Zirkonzahn®**

*Human Zirconium Technology*




**PRETTAU® 2**

*La Cultura Zirkonzahn*

## RESTAURACIÓN SUPERIOR DE ZIRCONIA PRETTAU® 2 SOBRE IMPLANTES

*Situación inicial:* Paciente con restauración superior insatisfactoria y ocho implantes presentes en la cavidad oral

- Fases de elaboración:*
- Toma de impresión y registro de mordida con la restauración existente
  - Con el software Zirkonzahn.Modellier, se diseña un provisional sobre implantes y una barra de titanio para aumentar la estabilidad
  - Se fresa el provisional en resina Prime, se estratifica con Gingiva-Composites y se inserta por fricción la estructura sobre la barra en la boca
  - Después de la evaluación positiva por parte del dentista y del paciente, se modela con el Zirkonzahn.Modellier la restauración definitiva, basándose en el provisional
  - Con el software Zirkonzahn.Nesting, se posicionó la restauración definitiva en el bloque de zirconia Prettau® 2 y se fresó con la fresadora M2 Teleskoper
  - Se infiltra previamente el borde incisal con Colour Liquid Waterbased Thinner para crear un tono esfumado de color natural; se infiltra la zirconia con Colour Liquid Prettau® 2 Aquarell 0M2 y se usan los colores intensivos de los Colour Liquid Prettau® Aquarell, para acentuar las tonalidades
  - Se estratifica la encía con Fresco Ceramics, se caracteriza con los ICE Stains 3D Blue Lightning by Enrico Steger y se hace glaseado con ICE Stains 3D Base Glaze
  - La barra se anodiza en color oro y se cementa en la estructura de zirconia

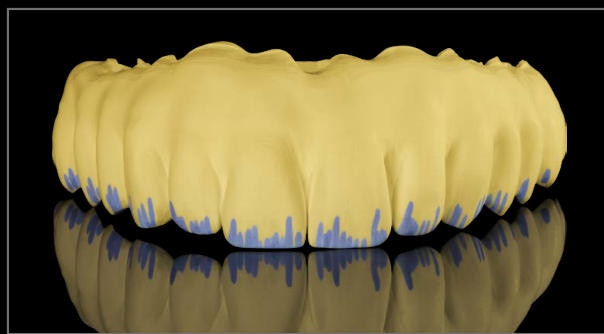

# 100 % ESTÉTICA, ESTRATIFICADO SÓLO EN LA ZONA GINGIVAL

*Dr. Harel Simon – Beverly Hills, EE.UU.*

*TPDM Marco Heidel – Zirkonzahn Education Center Brunico, Sudtirolo, Italia*

*TPD Bart Ziengs – Zirkonzahn Education Center Brunico, Sudtirolo, Italia*







## ¡NUEVO! PRETTAU® 2

- Zirconia altamente translúcida, con una extraordinaria resistencia a la flexión
- ¡Sin límites! Especialmente indicada para arcadas (monolíticas o reducidas para estratificarse con cerámica), así como para coronas individuales, inlays, onlays, veneers, barras y puentes de varias unidades
- No se producen fracturas (chipping), debido al diseño monolítico. No provoca abrasión al antagonista
- Personalización con los Colour Liquids Prettau® 2 Aquarell, cerámicas ICE Ceramics o Fresco Ceramics y ICE Stains 3D by Enrico Steger
- También disponible pre-coloreada con colores naturales esfumados (Prettau® 2 Dispersive®)



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY


Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Si desea conocer a nuestros afiliados comerciales en su propio país, consulte nuestra página web

## ¡NUEVO! 1 ÓRBITA – 4 DIÁMETROS

125, 106, 98 Y 95 mm

LÍNEA DE FRESADORAS CONFORT M2 CON **TELESKOPER ORBIT EXTRA GRANDE**. TOTALMENTE AUTOMÁTICA, FLEXIBLE Y LIBRE DE VIBRACIONES

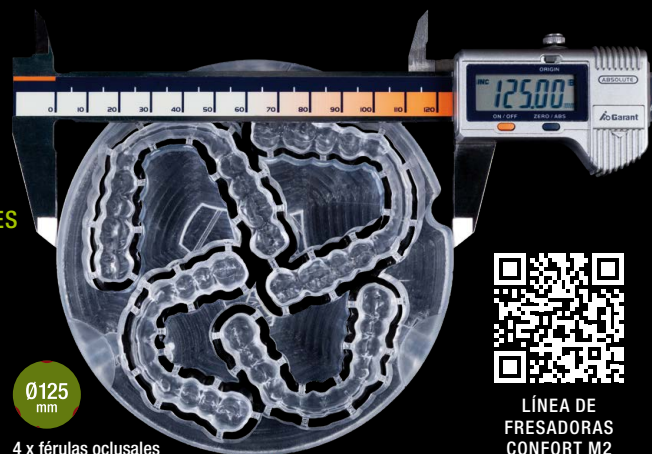

2 x férulas oclusales

2 x férulas oclusales

3 x férulas oclusales

4 x férulas oclusales



LÍNEA DE  
FRESADORAS  
CONFORT M2



WEAB2695ES=