

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] SKIN[®]


LA CULTURA ZIRKONZAHN

PRETTAU® SKIN® – RESTAURO MININVASIVO CON FACCETTE IN ZIRCONIA ULTRA SOTTILI

Trattamento pianificato: Faccette monolitiche (Prettau® Skin®), corone parziali e un ponte a tre elementi in zirconia Prettau® 2 Dispersive®

Fasi di lavoro:

- Determinazione della tonalità tramite la scala colori Zirkonzahn Shade Guide Prettau® 2 Dispersive®
- Articolazione virtuale del modello secondo il metodo *Plaster (PlaneSystem®)*
- Realizzazione del set-up nel software Zirkonzahn.Modifier e individualizzazione del set dentale AIDA della libreria virtuale *Heroes Collection*
- Determinazione della direzione di inserimento ottimale per realizzare un modello *block-out* per i mock-up superiore e inferiore
- Nesting dei mock-up nel blocco in resina *Temp Premium Flexible* e successivo fresaggio; prova in bocca
- Regolazione digitale del primo set-up e creazione delle guide di preparazione, strumenti di comunicazione utilizzati dall'odontotecnico per suggerire al dentista quali aree dentali preparare in modo minimamente invasivo. In questo modo, le idee estetiche e funzionali dell'odontotecnico possono essere considerate nel risultato finale
- Preparazione mininvasiva dei denti
- Design e fresaggio delle faccette ultra sottili (0,2 mm), delle corone parziali e del ponte a tre elementi in zirconia Prettau® 2 Dispersive®
- Sinterizzazione e caratterizzazione con gli *ICE Stains 3D by Enrico Steger*
- Cementazione dei restauri finali nel cavo orale

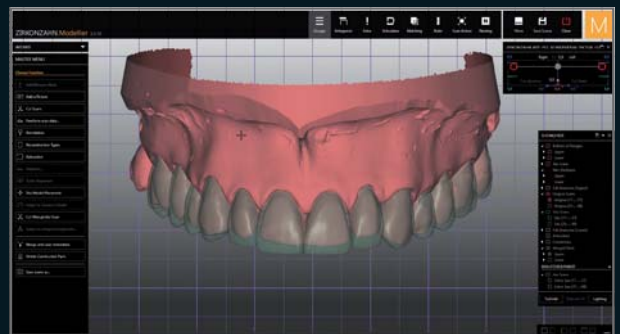



100% CREAZIONE DIGITALE, DESIGN MONOLITICO

Dr. Francisco García Torres – Messico

Odt. Alexander Lichtmannegger – Zirkonzahn Education Center Brunico, Alto Adige, Italia



NOVITÀ! PRETTAU® SKIN®

Con la nuova tecnica per la realizzazione di faccette ultra sottili in zirconia Prettau®, è possibile restituire al paziente un sorriso sano con una preparazione nulla o minima della sostanza dentale. Questa nuova tecnica è adatta per la correzione estetica dei denti in caso di discromie, spazi interdentali irregolari, denti storti, malformati e abrasivi.





NOVITÀ! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- Zirconia policromatica dalla traslucenza molto elevata, con sfumature naturali di colore e un'eccellente resistenza alla flessione
- Senza limiti! Particolarmente adatta per circolari monolitici ma anche per corone singole, inlay, onlay, faccette, barre e ponti a più elementi (ridotti o monolitici)
- Nessuna scheggiatura della ceramica (grazie al design monolitico), né abrasione dell'antagonista
- Caratterizzazione individuale del restauro con Colour Liquids Prettau® Aquarell Intensivi, ICE Ceramics, Fresco Ceramics e ICE Stains 3D by Enrico Steger





HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NOVITÀ! 1 ORBITA – 4 DIAMETRI 125, 106, 98 E 95 mm

GAMMA DI FRESATRICI COMFORT M2 CON **TELESKOPER ORBIT EXTRA-LARGE**.
AUTOMATICHE, VERSATILI E **SENZA VIBRAZIONI**

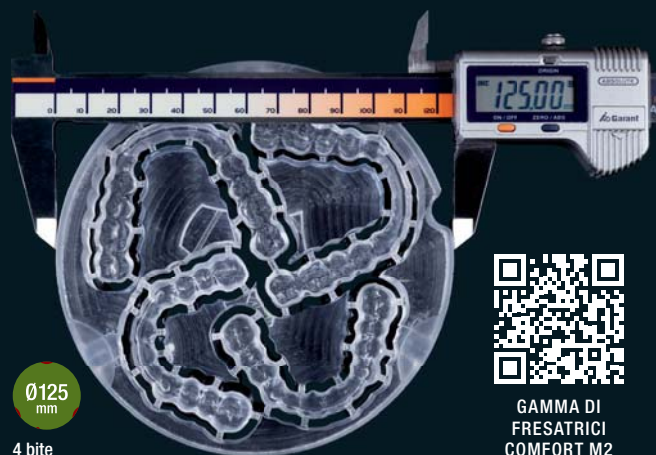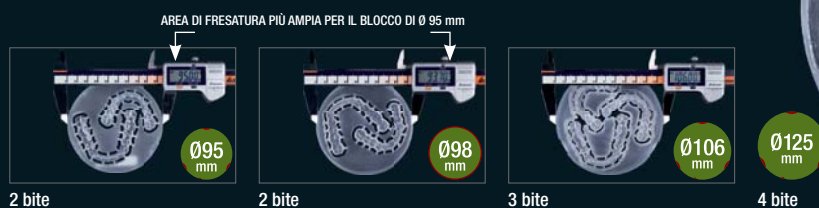

GAMMA DI
FRESATRICI
COMFORT M2



WEAB26891T=