


Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



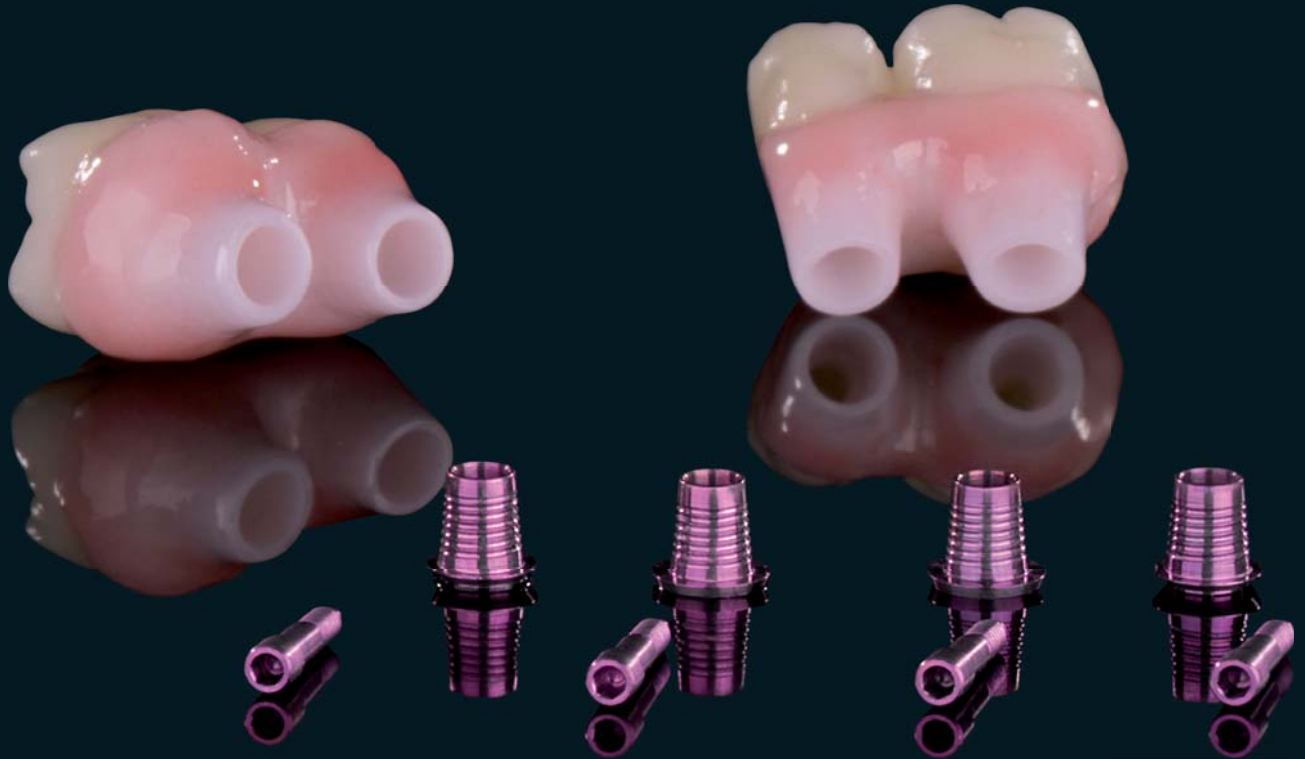


100% PRETTAU® ZIRKON - MADE BY CAD/CAM

„Zirkon braucht Helden“ Enrico Steger

Geteilte Oberkiefer Prettau®-Brücke auf Implantaten und individuellen Zirkonabutments

Aufgrund der Situation der bestehenden Knochensubstanz mussten bei diesem Fall die Implantate im Frontzahnbereich des Oberkiefers ungünstig nach vestibulär neigend gesetzt werden. Die Schraubenkanäle waren somit labial ausgerichtet, weshalb wir uns zusammen mit dem Behandler dafür entschieden, individuelle Zirkonabutments anzufertigen. Diese wurden mit Zirkonzahn Titanbasen verklebt und zahnfleischfarben anodisiert, um einen harmonischen Übergang zur Gingiva zu gewährleisten. Nachfolgend wurden die Überkonstruktionen geplant. Im Seitenzahnbereich auf 15–16 und 25–26 wurden je zwei monolithische, okklusal zu verschraubende Brücken konstruiert, während für den Frontzahnbereich eine mit Keramik zu verblendende Struktur hergestellt wurde, welche im Mund mit den individuellen Abutments verklebt wurde. Nach dem Fräsvorgang wurden die Zirkonstrukturen mit Colour Liquid Prettau® Aquarell individuell eingefärbt und nach dem Sintern mit ICE Zirkon Keramik und mit den ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger fertiggestellt.

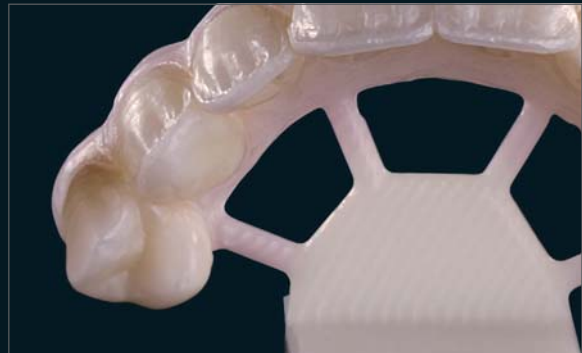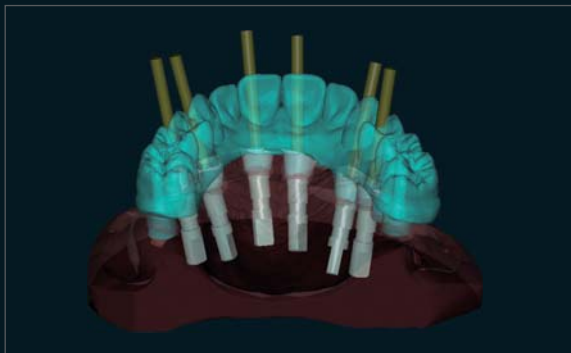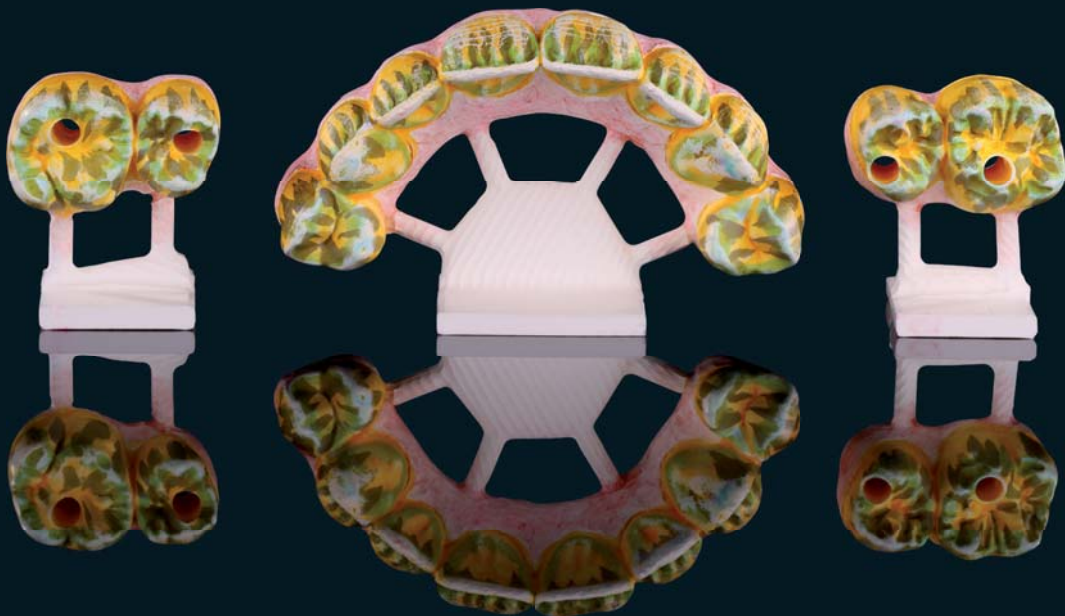

Die Prettau® Bridge

Prof. Dr. Wael Att – Universitätsklinikum Freiburg, Deutschland

Manfred Pörnbacher – Zirkonzahn Education Center Bruneck, Südtirol



Zirkonzahn®

VORTRAGSTERMINE
**ENRICO
STEGE**
.....
WWW.ZIRKONZAHN.COM



Gefräst mit dem CAD/CAM System 5-TEC

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



WEAA5354=

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltenlich Änderungen. Version: 16.01.2015