

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



TITANBASEN K80 ANGLED SCREW CHANNEL

Die Zirkonzahn Kultur

TITANBASIS K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)

Die Titanbasen K80 Angled Screw Channel (ASC) vereinen zwei Vorteile in einem: Sie besitzen einen hohen Kamin, um eine optimale Stabilisierung und Kräfteverteilung der Rekonstruktion zu gewährleisten.




Zum anderen verfügen die Titanbasen über eine seitliche Schraubkanalöffnung, um den Schraubenzugangskanal von 0°-30° zu angulieren. So können nicht optimale Implantatpositionen ausgeglichen werden. Die Basen sind am Kamin mit Abtrennmarkierungen versehen, um die Höhe zu modifizieren und sie so individuell an die Rekonstruktion anzupassen. Diese Rillen vergrößern zugleich die Oberfläche und sorgen so für eine optimale Haftung des Zements.

Je nach Verwendung sind sie mit oder ohne rotationsgesicherten Implantatanschluss erhältlich. Durch die zusätzliche Rotationssicherung am Kamin wird gewährleistet, dass sich die aufzementierte Versorgung nicht verdreht.

Vor allem bei Implantatdivergenzen im Frontzahnbereich kann es durch die Verwendung einer normalen Titanbasis zu einem labialen Austreten des Schraubenkanals kommen. Mit den neuen Titanbasen K80 Angled Screw Channel (ASC) ist es möglich, den Zugang des Schraubenkanals bis zu 30° zu angulieren. Auf diese Weise können ungünstige Implantatpositionen ausgeglichen und ein vestibuläres Austreten der Schraubenkanäle verhindert werden, um die Ästhetik der Restauration nicht zu beeinträchtigen.

Alle Titanbasen von Zirkonzahn sind in einer hochwertigen Vergoldung erhältlich. Die Goldbeschichtung erhöht die Biokompatibilität und der goldene Farbton reduziert den Grauwert der gesamten Restauration. Sie können aber auch mit dem Titanium spectral-colouring Anodizer verschiedenfarbig anodisiert werden.

Die Titanbasen K80 Angled Screw Channel (ASC) eignen sich für definitiv zementierte Versorgung.

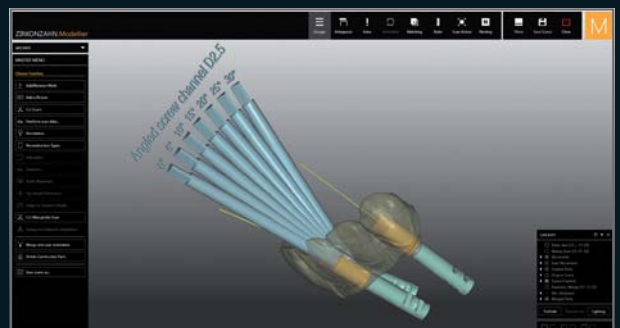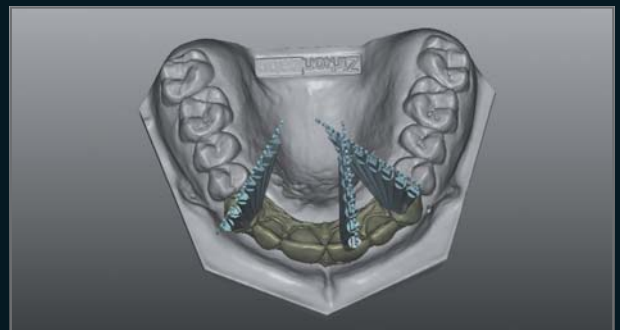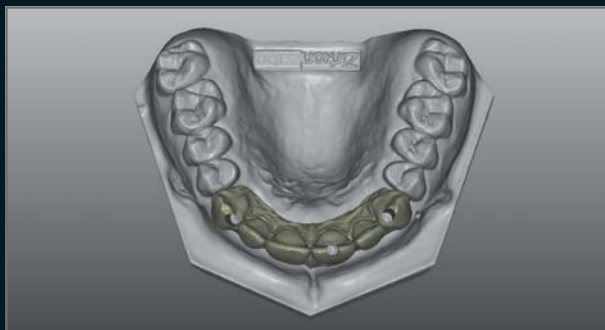

100 % ÄSTHETIK, DANK INTELLIGENTEN LÖSUNGEN

KONISCHE TITANBASIS NON HEX




TITANBASIS NON HEX
K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)





TITANBASIS K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)

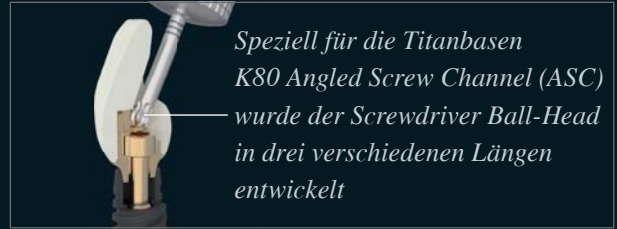

TITANBASIS NON HEX K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)

- Für mehrgliedrige Versorgungen

TITANBASIS HEX K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)


- Für Einzelversorgungen



- Mit oder ohne rotationsgesicherten Anschluss mit zusätzlicher Rotationssicherung am Kamin sowie Abtrennmarkierungen, welche zur Modifizierung der Höhen dienen
- Für erhöhte Biokompatibilität und zur Reduzierung der Grauwerte auch vergoldet erhältlich
- Seitliche Schraubkanalöffnung, um den Schraubzugangskanal von 0°-30° zu angulieren und so nicht optimale Implantatpositionen auszugleichen
- Kaminhöhe an Zahnlänge anpassbar

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

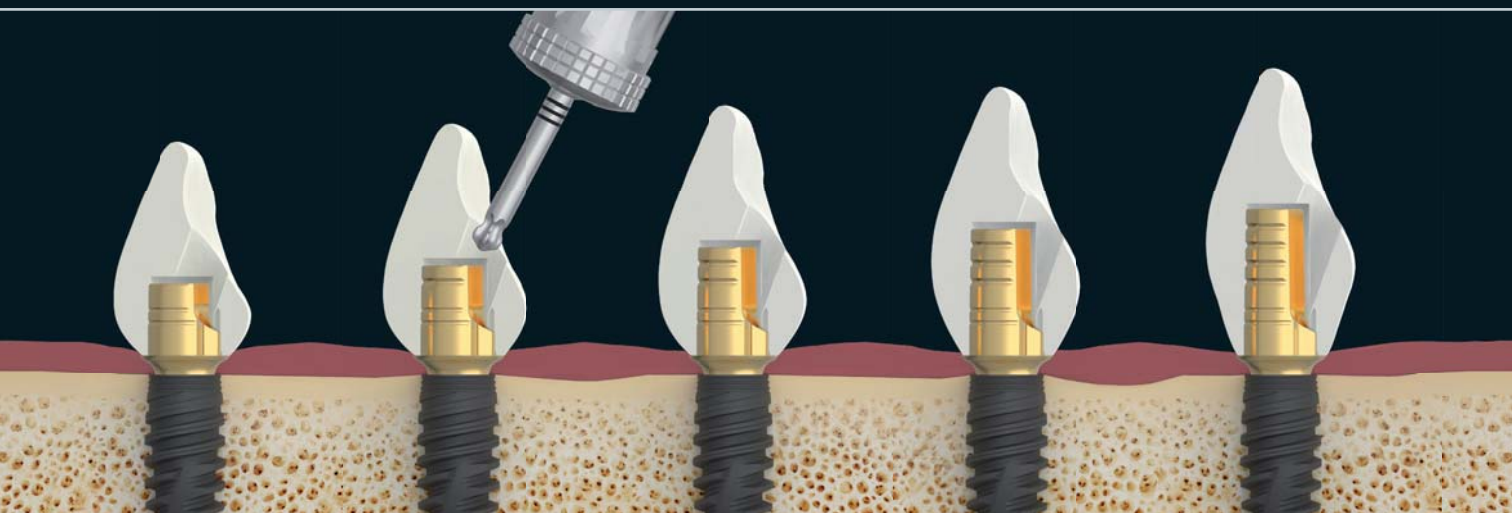

WEAB3544DE=