

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



100% ZIRCONIA PRETTAU

El Prettau Bridge


Las restauraciones de los maxilares superior e inferior con implantes están expuestas a cargas mucho mayores debido a la falta de sensores propioceptivos, lo cual puede ocasionar el quebrado de la cerámica. Para evitarlo, existe una nueva opción: elaborar las piezas en 100% zirconia como puentes „Prettau Bridge“. Para realizar este tipo de trabajo, se elabora una prótesis completa que se probará en la boca del paciente para comprobar el resultado estético y funcional. Finalmente, esta prótesis completa se transforma en zirconia con nuestro sistema de copiado y fresado manual. Para ello se utiliza la zirconia Prettau extra translúcida. La pieza entonces está hecha de 100% zirconia. Sólo las encías se reproducen con cerámica en diferentes tonalidades de color rosa. Los puentes de 100% zirconia sin cerámica muestran una solidez extremadamente alta que garantiza estabilidad absoluta, siempre y cuando se han mantenido los parámetros a observar (por ejemplo, el grosor de los conectores y el tiempo de enfriamiento).



El Prettau Bridge

Luca Nelli, Italia

Las dudas que pudieran presentarse pensando en la abrasión respecto al diente natural pueden descartarse según los informes más recientes de los estudios realizados. Se ha demostrado que el valor de abrasión de la cerámica respecto al diente natural es mayor que el de la zirconia que no ha sido revestida con cerámica.

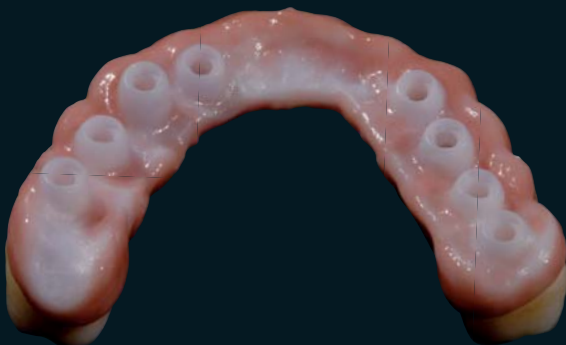

Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



Fresado con el sistema de fresado de Zirkonzahn



WEAA5610=