

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



100% ZIRCONIA PRETTAU

“Con perseverancia a la perfección” Enrico Steger

Zirconia Prettau

El caso de este paciente debía tratarse con un puente de zirconia Prettau sobre seis implantes Straumann en el maxilar superior. La marcada pronunciación de los molares 17 y 27 hacía necesario un apoyo adicional mediante unas coronas telescópicas primarias. Los implantes estaban marcadamente posicionados en dirección bucal, de modo que sólo se podía realizar un puente atornillado en el área oclusal con segmentos atornillados horizontalmente. Estos elementos atornillados secundariamente con el sistema Screw-Tec se colocaron en una subconstrucción, fresada a 0°. Los dientes anteriores 11, 12, 21 y 22 se cubrieron con carillas (Venners).

En la cerámica de la encía, se prestó especial atención a la delimitación entre la encía y la mucosa alveolar y a la imitación de la pigmentación de melanina que se encuentra en esta zona, así como a la caracterización de la encía marginal y adherida.



El Prettau Bridge

Jürgen Auffarth, Austria

En colaboración con el protésico dental Christian Hannker, del Laboratorio Dental Bellmann & Hannker (Alemania)




Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN World Wide - José Luis Ayuso - C/Isaac Albéniz, 1 - 08210 Barberà del Vallès - Barcelona
Teléfono: +34 937 290390 - Fax: +34 937 290450 - Email: iberica@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com*

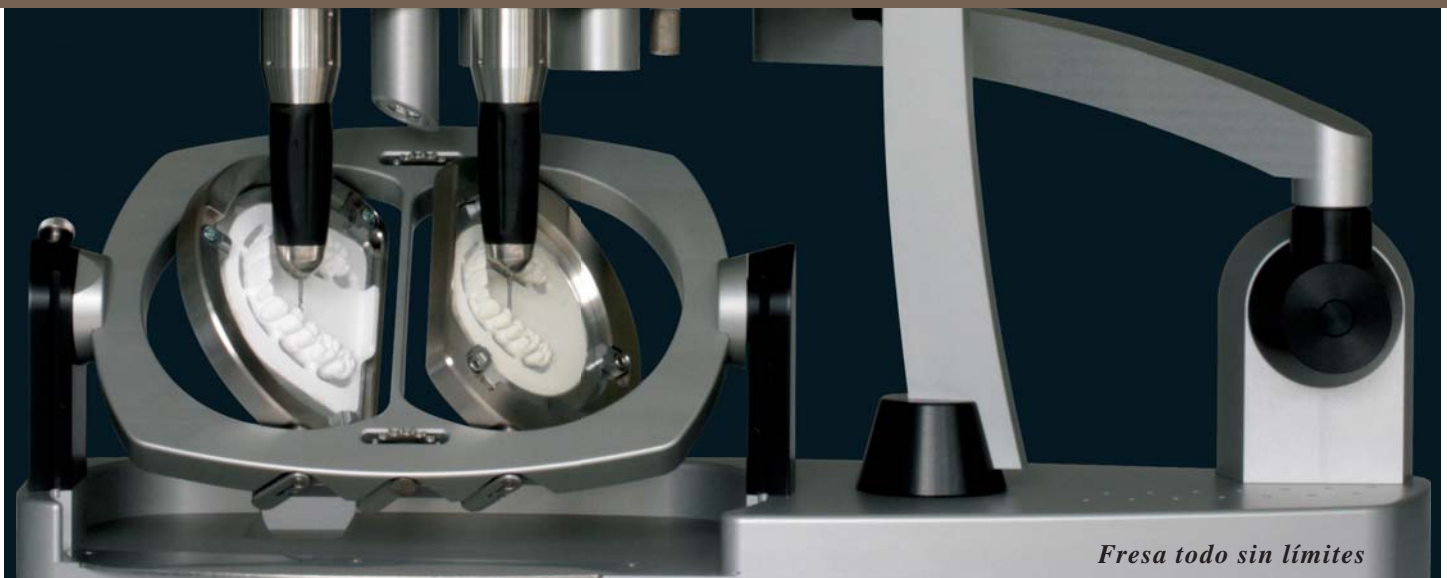

Fresa todo sin límites