

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology






PRETTAU[®] 2 DISPERSIVE[®]

La Cultura Zirkonzahn

RESTAURACIÓN COMPLETA DE ZIRCONIA PRETTAU® 2 DISPERSIVE® SOBRE IMPLANTES

Rehabilitación planeada: El paciente quería una restauración fija sobre implantes para ambas arcadas

- Fases de elaboración:*
- Toma de impresiones y registro de la mordida con las prótesis existentes; escaneo facial en 3D con el Face Hunter
 - Set up y diseño digital de las dos restauraciones con el Zirkonzahn.Modifier, para corregir la oclusión y la estética
 - Producción y caracterización de las nuevas prótesis de resina en Temp Basic e inserción en la boca. Se utilizaron como base para los pasos posteriores del tratamiento
 - Planificación de implantes y producción de guías quirúrgicas con el Zirkonzahn.Implant-Planner
 - Impresión de los modelos de implantes con los análogos integrados, según lo planificado
 - Integración de los pernos para una mayor estabilización de las guías quirúrgicas y los provisionales de carga inmediata, garantizando una orientación 3D; impresión de guías quirúrgicas y provisionales
 - Caracterización de los provisionales
 - Inserción de implantes y toma de impresiones después del periodo de cicatrización
 - Colocación de provisionales en la cavidad oral; escaneo de provisionales en modelos maestros para el posterior diseño de las restauraciones definitivas de zirconia
 - Producción de restauraciones Prettau® 2 Dispersive® con la fresadora M2 Dual Teleskoper
 - Caracterización de los dientes y zonas gingivales; inserción en la boca del paciente

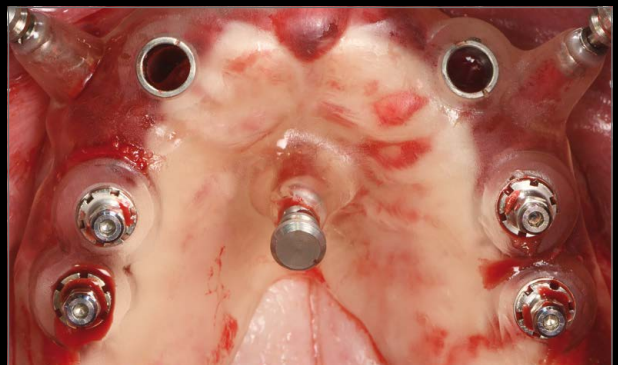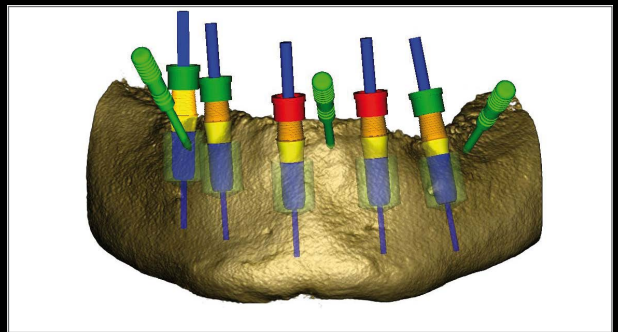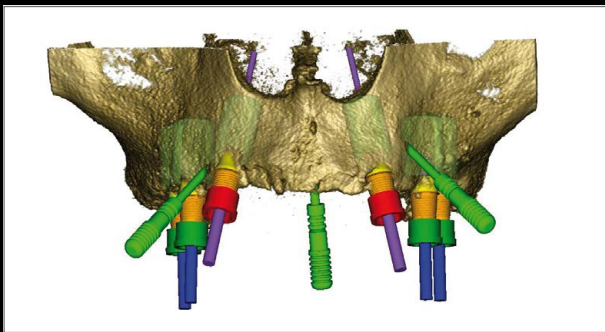

PLANIFICACIÓN PRECISA CON EL FLUJO DE TRABAJO DIGITAL DE ZIRKONZAHN

TPDM Michael Bergler, Clinical Assistant Professor, Director, Center for Virtual Treatment Planning, Filadelfia, PA, EE.UU.

Dr. Wael Isleem, Filadelfia, PA, EE.UU.

Dr. Howard Fraiman, Clinical Associate Professor, Director, Periodontal Prosthesis Program, Filadelfia, PA, EE.UU.





¡NUEVO! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- Zirconia policromática altamente translúcida, con colores naturales esfumados y una excelente resistencia a la flexión
- ¡Sin límites! Especialmente indicada para arcadas completas monolíticas, así como coronas individuales, inlays, onlays, veneers, barras y puentes de varias unidades (monolíticas o reducidas)
- No se producen fracturas (chipping), debido al diseño monolítico. No provoca abrasión al antagonista
- Permite la caracterización personalizada de la restauración con Colour Liquids Prettau® Aquarell intensivos, ICE Ceramics, Fresco Ceramics, ICE Stains Prettau® y ICE Stains 3D by Enrico Steger



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Si desea conocer a nuestros afiliados comerciales en su propio país, consulte nuestra página web

¡NUEVO! 1 ÓRBITA – 4 DIÁMETROS

95, 98, 106 Y 125 mm

LÍNEA DE FRESADORAS CONFORT M2 CON TELESKOPER ORBIT EXTRA GRANDE. TOTALMENTE AUTOMÁTICA, FLEXIBLE Y LIBRE DE VIBRACIONES

