

# Zirkonzahn<sup>®</sup>

*Human Zirconium Technology*



**100 % ZIRCONE PRETTAU<sup>®</sup>**

## *Une prothèse complète amovible garantie à vie !*

L'idée : réaliser une prothèse « tout céramique » amovible, ancrée sur deux barres en zircone fraisée. Ces deux barres comportent à chaque extrémité une partie mâle (attachement de type glissière) sur laquelle reposera la partie femelle en résine. La force de friction entre la partie mâle et la partie femelle de chaque attachement assurera la rétention de la prothèse. La partie femelle étant remplaçable, garantira une longue durée de vie à la prothèse.


Afin d'être positionnée correctement par rapport à la restauration, chaque barre est fraisée à partir d'une armature réalisée en résine Frame. Toute la restauration – barres comprises – est en zircone. Seules les parties gingivales sont revêtues de céramique cosmétique (rose). Au final vous avez donc un bridge amovible complet, ancré sur barres.



# Bridge Prettau®

Georg Walcher, Zirkonzahn Italie

Dr. Nico Bühler

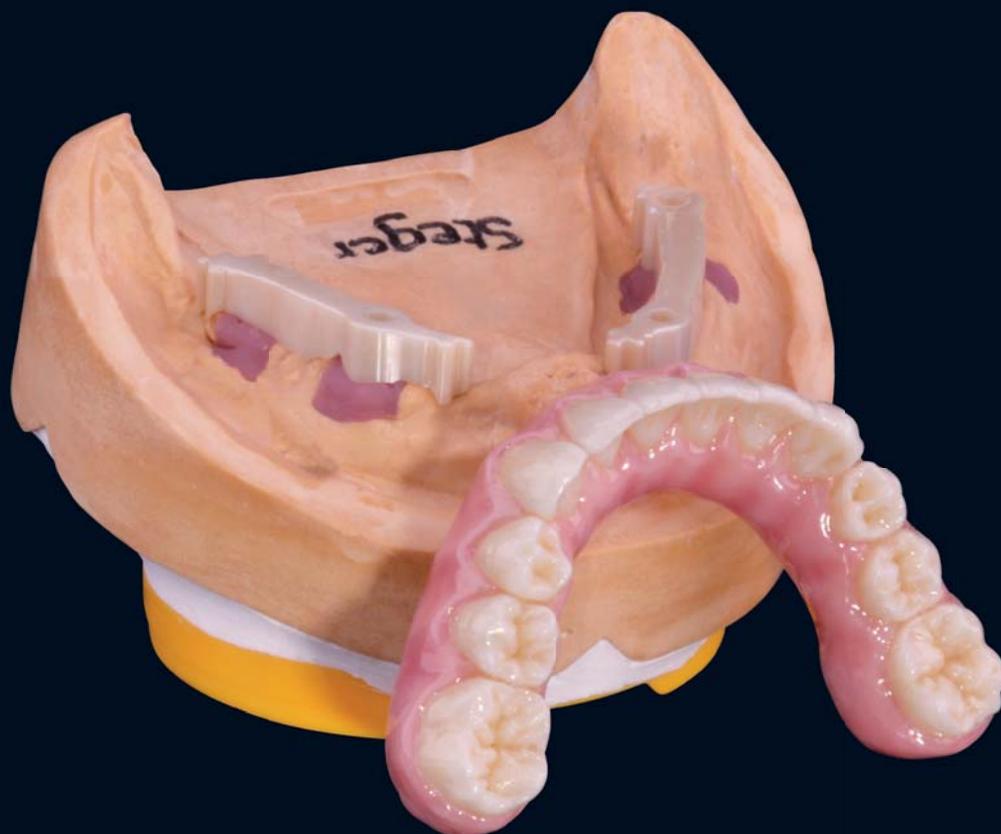


# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*Zirkonzahn Worldwide – Tél +39 0474 066 680 – Tél +33 388 23 30 97 – info@zirkonzahn.com*

*ROTEC – Tél +33 240 62 11 02 – Fax +33 240 24 72 15 – contact@rotec.fr – www.rotec-fr.com*

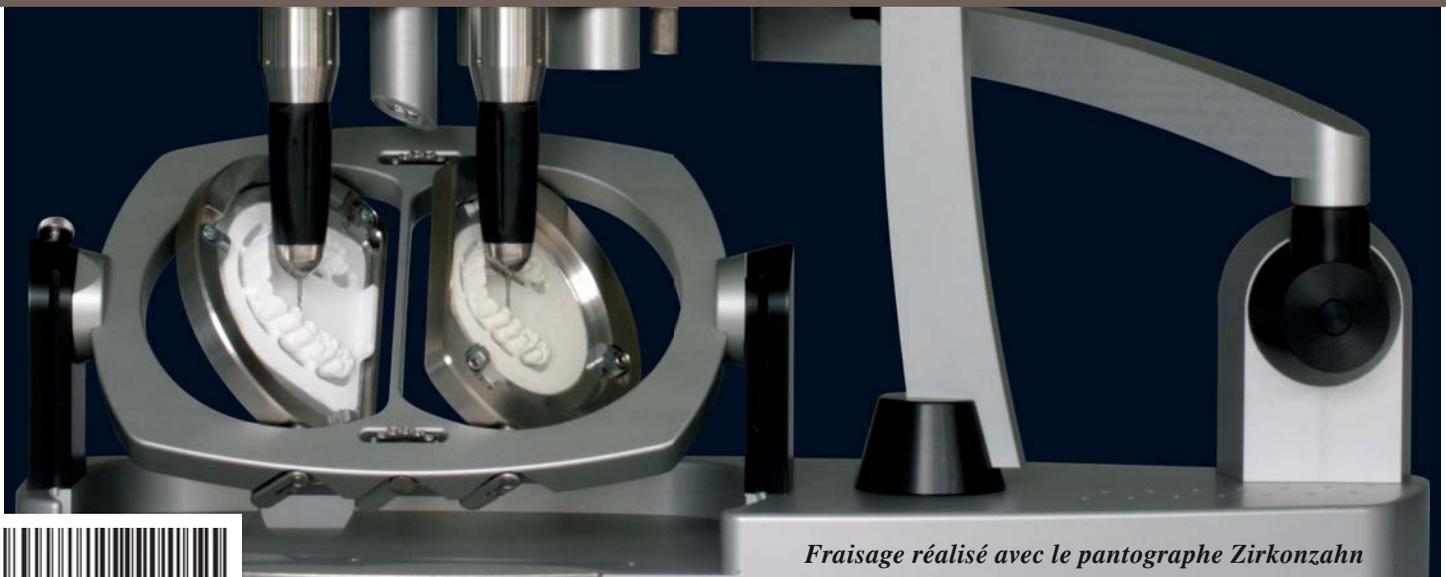

*Fraisage réalisé avec le pantographe Zirkonzahn*



WEAA5709=