

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



ALL ZIRCONIA

Restauration sur six implants


Situation de départ : chez un patient avec une mâchoire supérieure fortement avancée, on prévoit de déplacer la rangée dentaire en arrière. En raison de la rétro-position très forte il est avantageux d'utiliser de la zircone colorée qui simplifie la construction de la structure sur laquelle les canaux de la vis dans la zone buccale se trouvent devant les dents. Cette zone a été stratifiée en utilisant *ICE Zirkon Céramique Tissue* de couleur rose. Les canaux de la vis ont été ensuite scellés avec du matériau composite (Gradia, GC) de couleur rose.

Puisque l'accès de la vis se trouvait dans une position défavorable, des couronnes individuelles ont été cimentées sur les deux canines stratifiées.



Restauration sur six implants

Laboratoire de technique dentaire Antonio Lazetera, Italie - Dr. Andrea Damiola, Italie

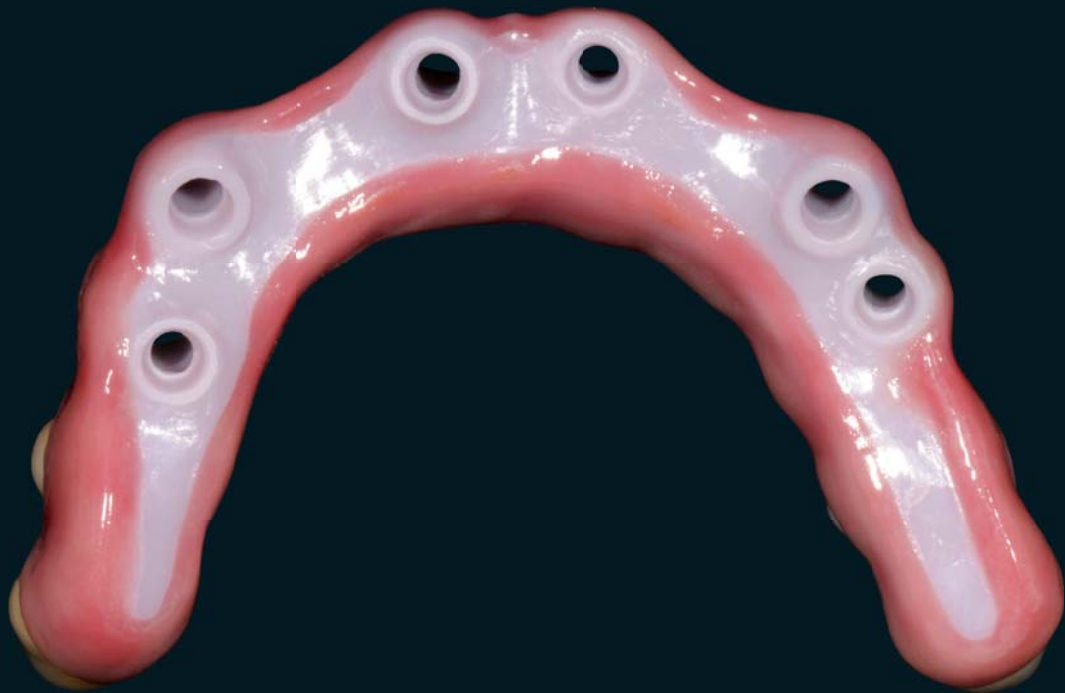


Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

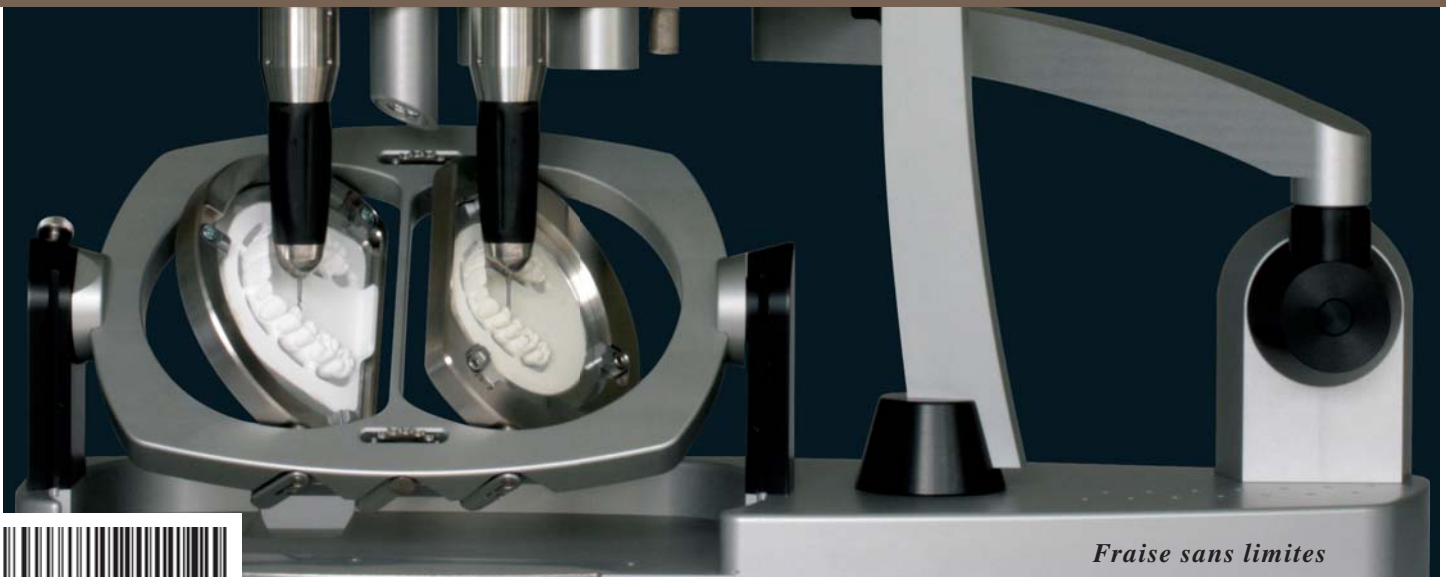

WEAA5711=

Fraise sans limites