


Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology

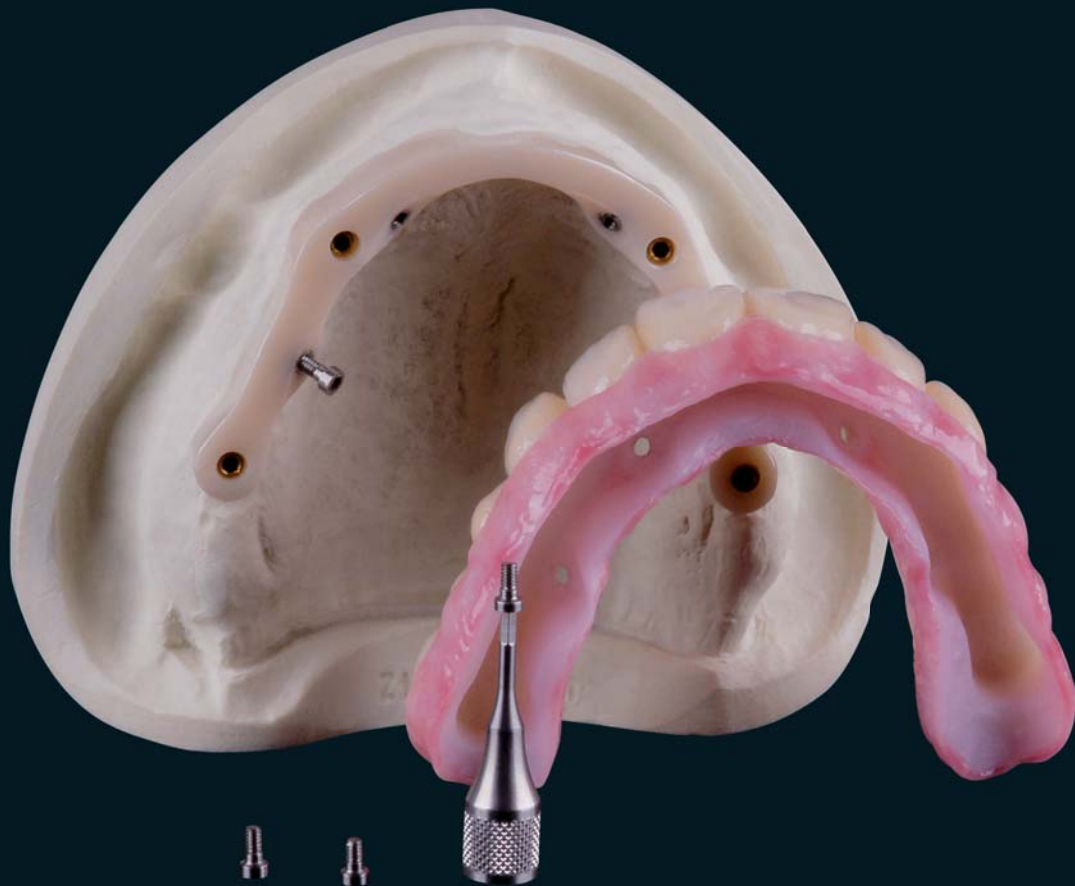

100 % ZIRCONE « PRETTAU »

Bridge « Prettau »

Notre travail a consisté à réaliser pour ces 4 implants – placés dans les secteurs postérieurs – une prothèse amovible sur barre d'ancrage fixée par 4 vis.

La barre a été réalisée en zircone, par fraisage. Elle a ensuite été retouchée avec une fraise diamantée n° 1 en utilisant le paralléliseur. Un aspect brillant lui a ensuite été donné par polissage. 4 vis ont alors été introduites dans la barre pour un éventuel vissage de la construction secondaire. Celle-ci et la construction primaire étant 100 % zircone, une qualité de friction étonnante a pu être obtenue.

La restauration a donc pu être fixée sans vissage de la construction secondaire (ce vissage n'est utilisé que lorsque la friction s'avère insuffisante).



Bridge « Prettau »

Dr. Rogelio Espinosa, Zirkonzahn Mexique



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

ZIRCONLAB - Yves Probst - Tel +33 388 69 55 44 - zirconlab@wanadoo.fr - www.zirconlab.com



Fraise sans limites



WEAAS713=