

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



100 % ZIRCONE PRETTAU® - MADE BY CAD/CAM

« La perfection par la persévérance » Enrico Steger


Bridge Prettau® transvissé sur embases titane collées

Réalisé huit mois après une mise en charge immédiate, ce bridge Prettau® transvissé a été, en final, collé sur 6 embases titane.

Après validation de l'occlusion et de l'esthétique, le montage directeur a été scanné, puis lors de la modélisation, nous avons simplement opéré une légère réduction virtuelle des zones gingivales.

Avant de procéder à la coloration, à l'aide des Colour Liquid Prettau® Aquarell, étape clé du processus de fabrication du bridge Prettau®, toutes les parties destinées à recevoir l'incrustation céramique sont retravaillées manuellement.

La pose idéale des implants, associé à l'harmonisation des crêtes osseuses lors de la chirurgie, nous permet en définitive d'obtenir un couloir prothétique étroit, une surface de contact gingival plane et parfaitement polie, gage de confort et d'hygiène de notre patient.

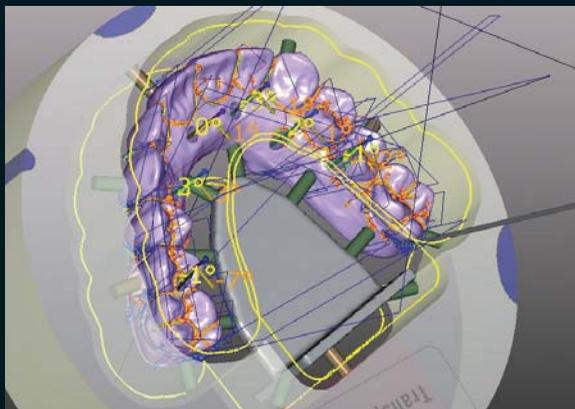

Le Prettau® Bridge

Dr. Jacques Cabon et Dr. Catherine Quelfennec – Brest

Maître proth. dent. Jean-Pierre Le Vot – Brest



Zirkonzahn®




Fraisé avec le système CAD/CAM 5-TEC de Zirkonzahn

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

ZIRKONZAHN France – 32, Rue du 22 Novembre – 67080 Strasbourg – Tel +33 388 23 30 97

ROTEC – Tel +33 240 62 11 02 – Fax +33 240 24 72 15 – contact@rotec.fr – www.rotec.fr

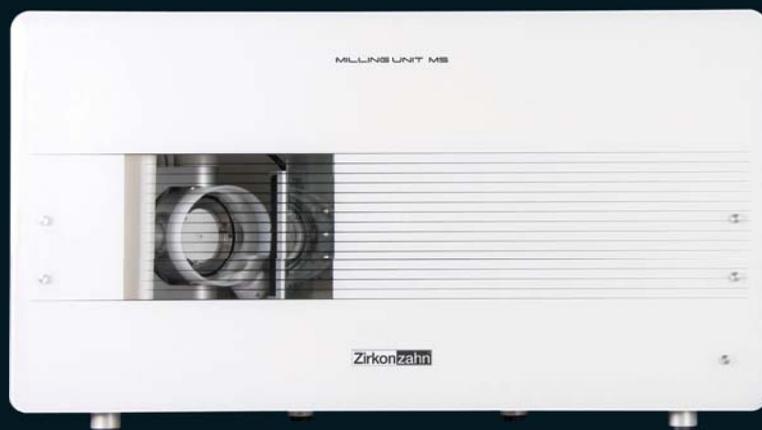

WEAA5753=

Toutes les informations sont susceptibles de modifications. Sauf erreur ou omission. Version: 17.06.2014