

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] 2

La Cultura Zirkonzahn


RESTAURO SUPERIORE IN ZIRCONIA PRETTAU® 2 SU IMPIANTI

Situazione iniziale:

Paziente con restauro superiore insoddisfacente e sei impianti già presenti nel cavo orale

Fasi di lavoro:

- *Presca dell'impronta e registrazione del morso con il restauro esistente*
- *Nel software Zirkonzahn.Modellier, progettazione di un provvisorio su impianti e di una barra in titanio per una maggiore stabilizzazione*
- *Fresatura del provvisorio in resina Prime, stratificazione con compositi gengivali e inserimento per frizione sulla barra nel cavo orale*
- *Dopo la valutazione positiva da parte del dentista e del paziente, modellazione del restauro definitivo sulla base del provvisorio su Zirkonzahn.Modellier*
- *Su Zirkonzahn.Nesting, posizionamento della protesi definitiva in un blocco di zirconia Prettau® 2 e produzione del restauro con la fresatrice M2 Teleskoper*
- *Pre-infiltrazione del bordo incisale con Colour Liquid Waterbased Thinner per creare una sfumatura di colore naturale; colorazione della zirconia con Colour Liquid Prettau® 2 Aquarell OM2 (tonalità Bleach) e accentuazione con i colori intensivi Colour Liquid Prettau® Aquarell*
- *Stratificazione della gengiva con Fresco Ceramics, caratterizzazione con ICE Stains 3D Blue Lightning by Enrico Steger e glasatura con ICE Stains 3D Base Glaze*
- *Anodizzazione in color oro e cementazione della barra nella struttura in zirconia*

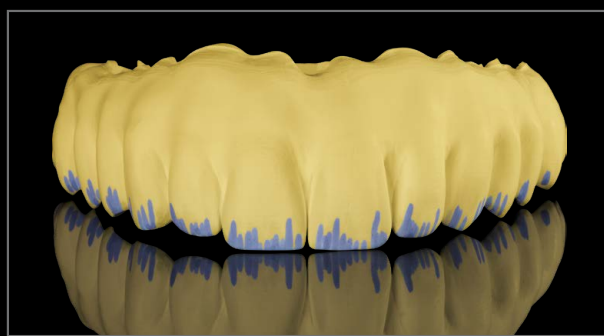

100 % ESTETICA, STRATIFICAZIONE SOLO NELLA ZONA GENGIVALE

Dr. Harel Simon – Beverly Hills, USA

M. Odt. Marco Heidel – Zirkonzahn Education Center Brunico, Alto Adige

Odt. Bart Ziengs – Zirkonzahn Education Center Brunico, Alto Adige





NOVITÀ! PRETTAU® 2

- Zirconia dalla traslucenza molto elevata, con una straordinaria resistenza alla flessione
- **Senza limiti!** Particolarmente adatta per circolari (strutture monolitiche o ridotte, da stratificare con ceramica) ma anche per corone singole, inlay, onlay, faccette, barre e ponti con più elementi
- Nessuna scheggiatura della ceramica (grazie al design monolitico), né abrasione dell'antagonista
- Caratterizzazione individuale del restauro con Colour Liquid Prettau® 2 Aquarell, ICE Ceramics, Fresco Ceramics e ICE Stains 3D by Enrico Steger
- Disponibile anche in versione pre-colorata, con sfumature di colore naturali (Prettau® 2 Dispersive®)



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY


Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NOVITÀ! 1 ORBITA – 4 DIAMETRI

125, 106, 98 E 95 mm

GAMMA DI FRESATRICI COMFORT M2 CON **TELESKOPER ORBIT EXTRA-LARGE**. AUTOMATICHE, VERSATILE **SENZA VIBRAZIONI**

AREA DI FRESATURA PIÙ AMPIA PER IL BLOCCO DI Ø 95 mm

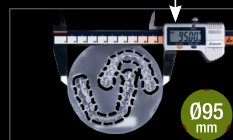

2 bite




2 bite



3 bite



4 bite

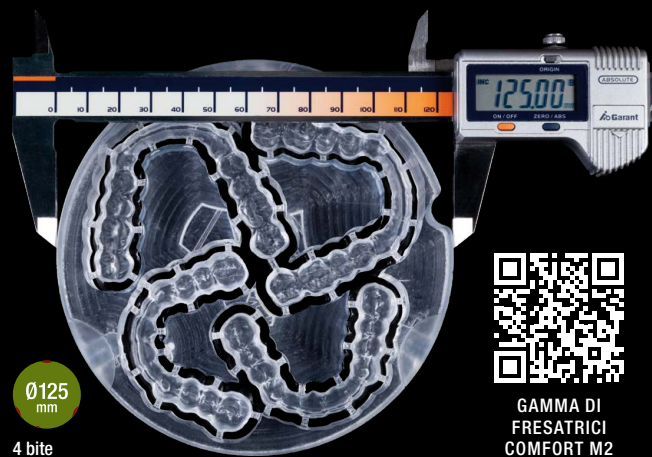

GAMMA DI
FRESATRICI
COMFORT M2



WEAB2695IT=