

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



FLORENCE TOTALPROX[®] DENTURE SYSTEM

La Cultura Zirkonzahn



RESTAURI RIMOVIBILI IN ABRO® BASIC MULTISTRATUM® E DENTURE GINGIVA BASIC

Situazione iniziale: Paziente edentula, con protesi totale nell'arcata superiore e protesi su impianti con attacchi "Locator" nell'arcata inferiore, in cui erano già stati inseriti due impianti

Dati disponibili: Foto della paziente, scansioni facciali in 3D, situazione orale digitale, protesi indossate dalla paziente

Restauro pianificato: Due protesi per l'arcata superiore e inferiore in resina Abro® Basic Multistratum® e Denture Gingiva Basic

- Fasi di lavoro:*
- Riproduzione digitale della situazione orale con lo scanner facciale 3D Face Hunter e il PlaneSystem®
 - Matching dei dati e articolazione digitale della situazione mediante l'articolatore virtuale PSI nel software Zirkonzahn.Modifier
 - Primo set-up virtuale e personalizzazione delle forme dentali tramite la libreria virtuale di denti completi di radice "Heroes Collection"
 - Scaling e posizionamento corretto dei denti in occlusione con il Plaster-Plane; Generazione automatica della zona gengivale
 - Nesting e fresatura delle strutture per il try-in in resina Try-In III
 - Valutazione degli aspetti estetici, funzionali e fonetici nella bocca della paziente con i try-in, che sono stati successivamente utilizzati come porta-impronte funzionali per la presa dell'impronta finale
 - Digitalizzazione delle nuove impronte e della nuova situazione adattata dal punto di vista estetico e funzionale. Adattamento del set-up digitale dei denti alle nuove impronte
 - Nesting di entrambe le basi protesiche nel blocco in resina Denture Gingiva Basic (Ø 125 mm) e dei denti nel blocco in resina Abro® Basic Multistratum® (Ø 95 mm)
 - Fresatura delle strutture nella fresatrice M2 Dual Teleskoper e stratificazione della gengiva con Gingiva-Composites
 - Incollaggio dei denti alle basi protesiche secondo la nuova procedura con Polibond
 - Inserimento finale delle protesi nella bocca della paziente

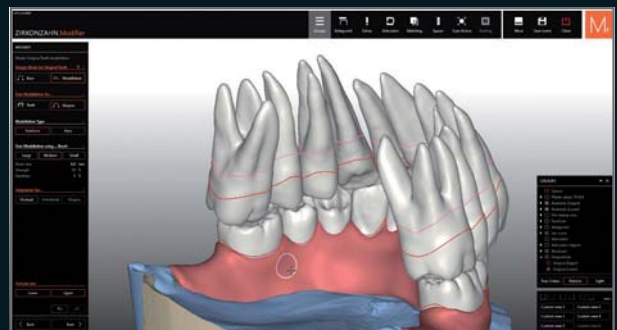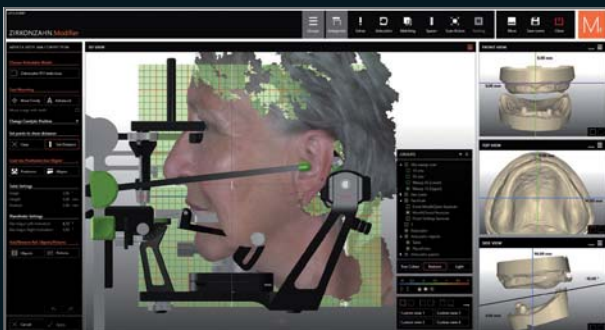

FLORENCE TOTALPROX® DENTURE SYSTEM 100 % EFFICIENTE E PRECISO!

Odt. Alexander Lichtmanegger – Zirkonzahn Education Center Brunico, Alto Adige, Italia



Nonostante la difficile situazione iniziale, grazie al nuovo Florence Totalprox® Denture System la paziente ha ricevuto nuove protesi a lungo termine di alta qualità. Il restauro ha soddisfatto le aspettative della paziente sia da un punto di vista estetico che funzionale, donandole una maggiore fiducia in se stessa.



NOVITÀ! ABRO® BASIC MULTISTRATUM®

La nuova resina Abro® Basic Multistratum®, con sfumature di colore naturali e dalle proprietà migliorate, si distingue per l'ottima trasparenza nonché per l'elevata resistenza alla flessione, alla frattura e all'abrasione. Concepita appositamente per la produzione di denti per basi protesiche, questa resina è ideale anche per la realizzazione di provvisori a lungo termine e strutture secondarie e terziarie.

NOVITÀ! DENTURE GINGIVA BASIC

Resina dal colore della gengiva dalle proprietà migliorate in termini di resistenza alla flessione e alla frattura, concepita appositamente per la produzione di basi protesiche. Il blocco in resina è disponibile anche con un diametro di 125 mm per fresare fino a due basi protesiche in un unico processo.



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NOVITÀ! 1 ORBITA – 4 DIAMETRI 125, 106, 98 E 95 mm

GAMMA DI FRESATRICI COMFORT M2 CON TELESKOPER ORBIT EXTRA-LARGE. AUTOMATICHE, VERSATILI E SENZA VIBRAZIONI



GAMMA DI FRESATRICI COMFORT M2



WEAB3540IT=