

# Zirkonzahn<sup>®</sup>

*Human Zirconium Technology*



**ALL ZIRCONIA**

## *Toronto Bridge suportada por seis implantes*


Situação inicial: Paciente apresenta uma acentuada protrusão do maxilar superior ( Classe II de Angle ), pretendendo-se alinhar os dentes superiores com a arcada inferior. A posição acentuadamente retraída dos dentes faz com que os acessos dos parafusos dos implantes se encontrem por vestibular em relação aos dentes. O uso de zircônia pigmentada por imersão favorece e simplifica a realização da estrutura de suporte e o recobrimento da porção vestibular com cerâmica ICE Zirkon Ceramic TISSUE em diversas tonalidades, procurando obter a melhor integração possível. Os canais de acesso aos parafusos serão selados com compósito “Gradia Gum” ( GC ) de cor rosa.

Sobre os caninos foram realizadas coroas individuais para solucionar a inconveniente emergência dos parafusos.



## *Toronto Bridge suportada por seis implantes*

Laboratório dentário António Lazetera, Itália – Dr. Andrea Damiola, Itália

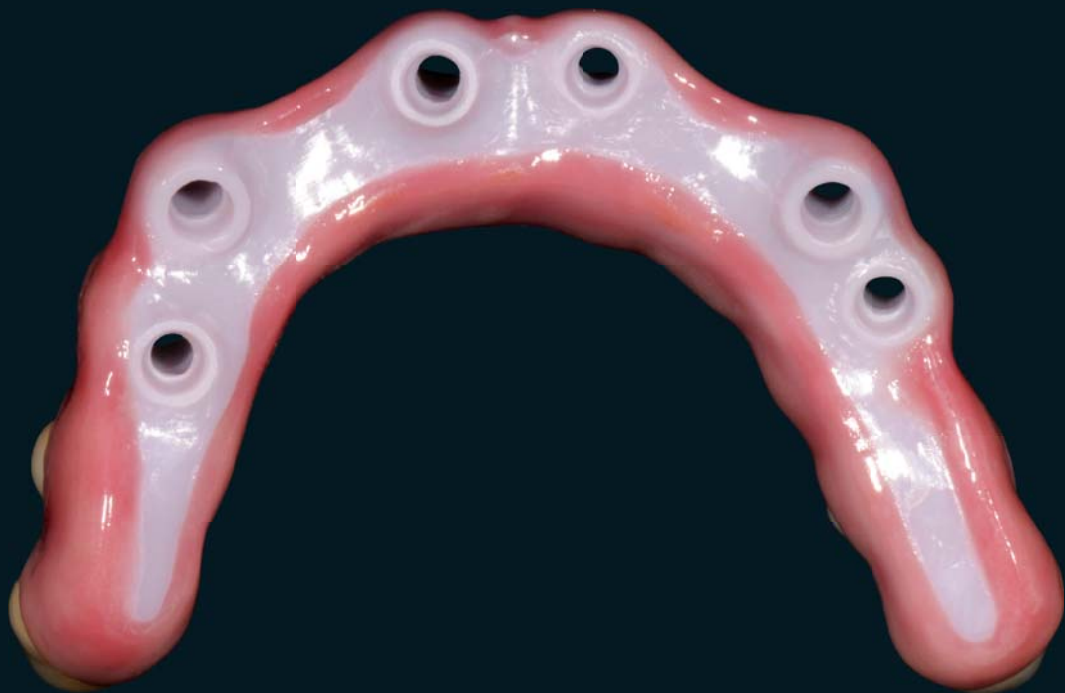


# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Portugal - Luis Macieira - Tel +351 217 58 62 69 - [zirkonzahnportugal@clix.pt](mailto:zirkonzahnportugal@clix.pt)

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - [info@zirkonzahn.com](mailto:info@zirkonzahn.com) - [www.zirkonzahn.com](http://www.zirkonzahn.com)

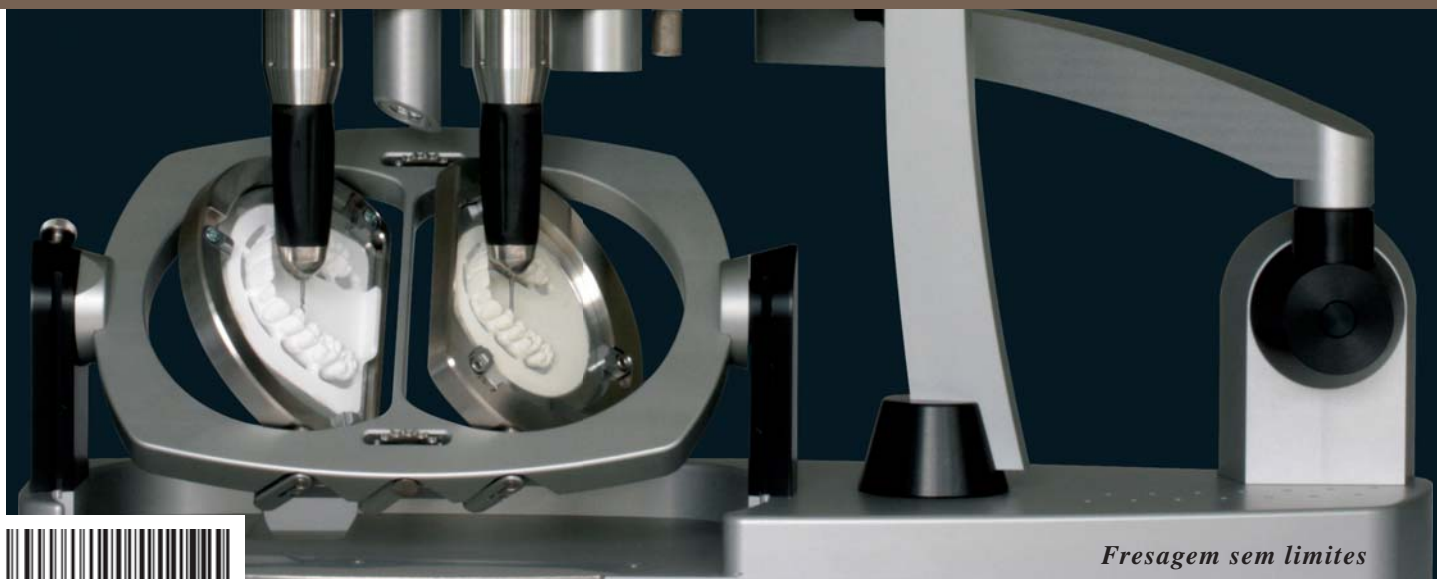

WEAA5911=

*Fresagem sem limites*