


Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology

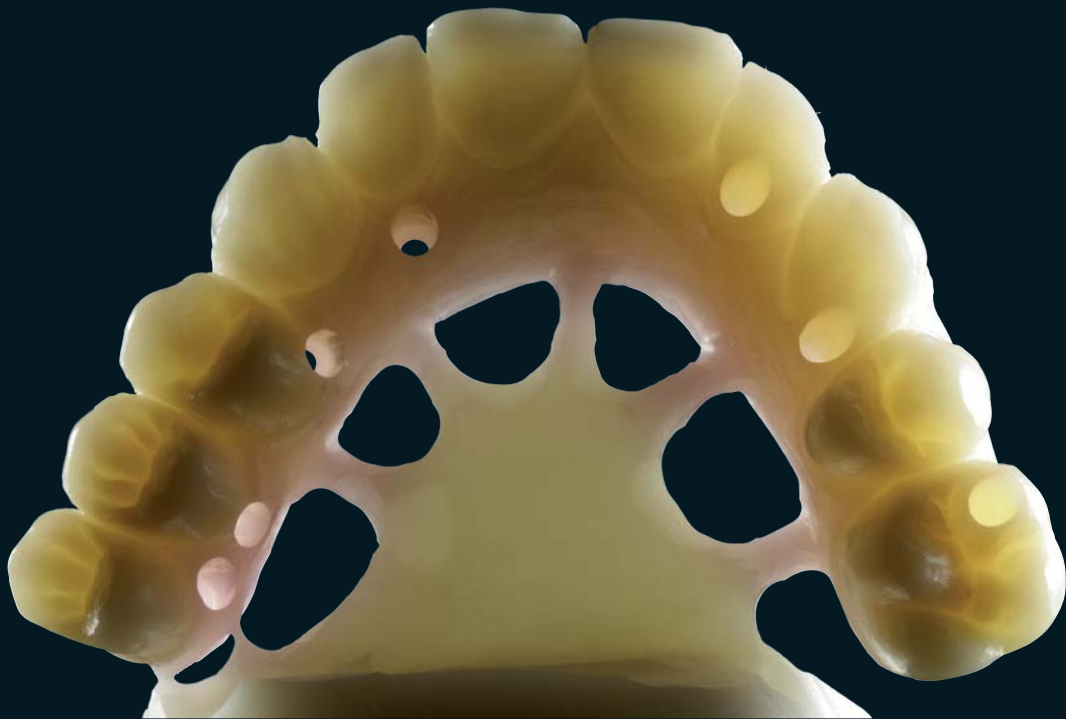

100% ZIRCONIA PRETTAU

„A Zirconia necessita de Heróis“ Enrico Steger

Zirconia Prettau – duas pontes em 100% zirconia

A técnica de coloração é decisiva para obter um efeito cromático tridimensional e um resultado idêntico ao dente natural. Com a técnica de coloração Prettau, pigmentamos primeiro os dentes e depois a gengiva. Na região dos dentes anteriores usamos as cores „Incisal Grey“, „Incisal Violet“ e o „Fluorescente da gama“ Colour Liquid Intensiv for Prettau. Antes de estratificar a cerâmica aplicou-se uma fina capa de dentina sobre a estrutura. Para obter um aspecto natural da gengiva deve-se usar uma gama de cores diversa na estratificação. Na faces linguais usamos apenas uma fina capa de esmalte. Estes passos realizam-se ao mesmo tempo que a estratificação da gengiva. No final para um aspecto natural realizamos um polimento manual.



Prettau Bridge

Jurgen Auffarrth (Austria)

em colaboração com Christian Hannker do laboratório Bellmann & Hamker (Alemanha)



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Portugal - Luis Macieira - Tel +351 217 58 62 69 - zirkonzahnportugal@clix.pt

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



Fresagem sem limites



WEAA5915=