

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



ПРОЗРАЧНЫЙ ЦИРКОНИЙ PRETTAU – ИЗГОТОВЛЕННЫЙ НА CAD/CAM

Забудьте о сколах керамики

Andreas Steyer

Prettau Zirkon


Для обеспечения долговечного результата при изготовлении реставраций с опорой на имплантаты для верхней и нижней челюсти необходимо использовать материалы с высокой механической прочностью. Это связано с тем, что из-за отсутствия проприоцептивных рецепторов естественных зубов, пациенты прикладывают значительно более высокие усилия при смыкании челюстей. Новый модифицированный материал циркониевой группы Prettau Zirkon полностью удовлетворяет повышенным требованиям к механической прочности. Все функциональные области и области окклюзионного контакта на 100% изготавливаются из этого материала. Только вестибулярная поверхность передних зубов, за исключением кромки режущего края, облицовывается керамическими материалами. Высокая прочность материала Prettau Zirkon гарантирует стойкость к абразивному износу и предотвращает сколы кромок режущего края и бугорков. Для традиционных полностью облицованных цельнокерамических мостовидных протезов вероятность возникновения этого эффекта (Chippen) остается очень высокой.



Prettau Bridge

Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Испания

Georg Walcher - Zirkonzahn Education Center

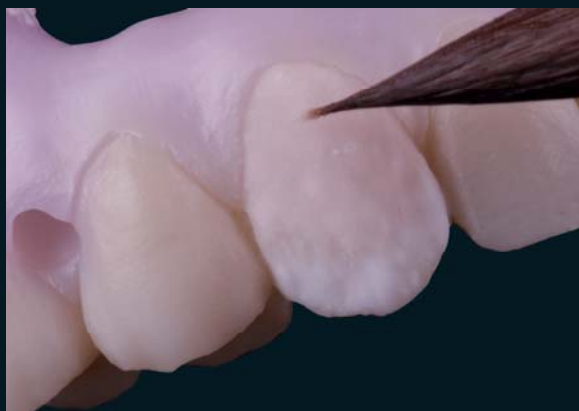

Zirkonzahn®



ФРЕЗЕРНЫЙ ЦЕНТР РИКОМ занимается изготовлением циркониевых конструкций любой сложности для стоматологических клиник и зуботехнических лабораторий, расположенных в любом регионе Российской Федерации. Работы выполняются опытными техниками из Германии, Израиля, России. Цены адекватные. Лицензия № 77-01-001935 от 22.03.07 тел. (495) 504 73 68.

Дополнительная информация


www.rikom-dent.ru, www.zirkonzahn.com, (495) 785 68 91, (495) 306 37 55, (495) 672 71 99.

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ООО "РИКОМ", 111524 г. Москва, ул. Электродная, 10

Тел.: +7 (495) 672 71 99, Факс: +7 (495) 306 37 55, e-mail: rikom-dent@mail.ru

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com

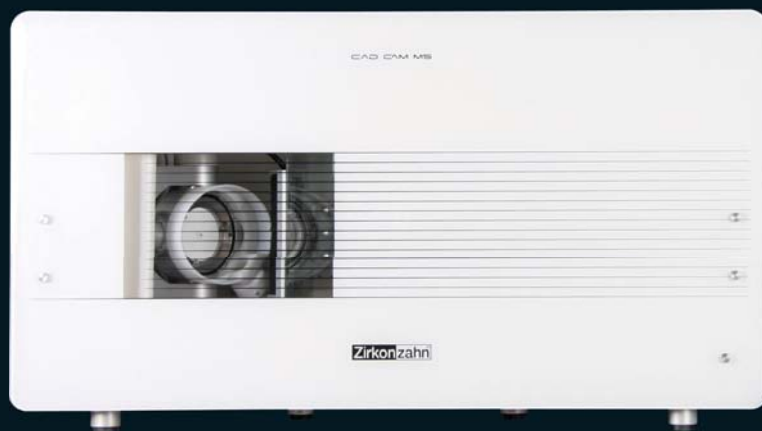

WEAA6523=

изготовлено системой CAD/CAM 5-TEC